

Sistem Pemantauan Glukosa Darah / Blood Glucose Monitoring System

Model: HS200 BT




Product Reg. No.: IVDC9695920-48347



Teknologi GDH-FAD / GDH-FAD Technology

Jalur ujian GDH-FAD dapat menghilangkan gangguan dari variasi oksigen dan gula bukan glukosa seperti maltosa dan galaktosa. /

The GDH-FAD test strips can eliminate interference from oxygen variations and non-glucose sugar such as maltose and galactose.

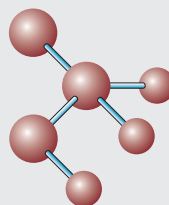

GDH-FAD

Enzim / Enzyme	GDH-FAD	GDH-PQQ	GOD
Terjejas oleh Oksigen / Affected by Oxygen	Tidak / No	Tidak / No	Ya / Yes
Terjejas oleh Galaktosa / Affected by Galactose	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Terjejas oleh Maltose / Affected by Maltose	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No

- Teknologi Bluetooth® / Bluetooth® low energy Technology
- Teknologi GDH- FAD (terpakai untuk julat HCT yang luas: 0-70%) / GDH- FAD Technology (applicable for wide HCT range: 0-70%)
- Pengkodan Auto / Auto Coding
- Masa Ujian 5 saat / 5 seconds Test Time
- Pengujian Kawasan Alternatif yang Diluluskan / Alternative Site Testing Approved
- Mengukur dengan Sampel Darah yang sedikit / Measures with Small Blood Sample
- Pengesanan Isipadu Sampel Darah Tidak mencukupi / Insufficient Blood Sample Volume Detection
- Purata 7/14/30 Hari untuk pengesanan corak glukosa darah / 7/14/30 Days Average for blood glucose patterns tracking
- Menyimpan sehingga 500 rekod / Stores up to 500 results
- Jalur ejektor mudah gelongsor / Easy-slide Strip Ejector
- Petunjuk Ralat / Error Indicator
- Pautan PC (pilihan) / PC Link (optional)



Teknologi Bluetooth® / Bluetooth® low energy Technology



Teknologi GDH-FAD / GDH- FAD Technology



Pengkodan Automatik / Auto Coding



Masa Ujian 5 saat / 5 seconds Test Time



Pengujian Kawasan Alternatif / Alternative Site Testing



Sampel Darah yang sedikit / Small Blood Sample



Purata Hari untuk pengesanan corak glukosa darah / Average Days for blood glucose patterns tracking



Menyimpan sehingga 500 rekod / Stores up to 500 results



Petunjuk Ralat / Error Indicator



Pautan PC (pilihan) / PC Link (optional)



Masukkan jalur ujian HS200 / Insert HS200 test strip



Letakkan sampel darah / Apply blood sample



Keputusan dalam 5 saat / Result in 5 seconds

Tyson Bioresearch, Inc.
5F, No. 16, 18, 20, 22, Kedong 3rd Rd.,
Zhunan Township, Miaoli County 35053, Taiwan